


Mesa Quirúrgica Steris Amsco 3085

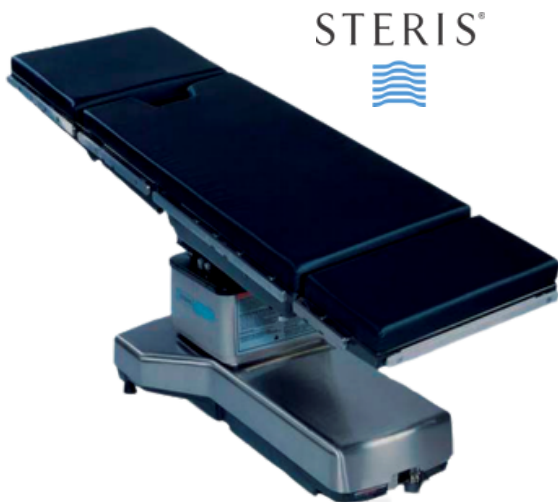

STERIS®


*Las imágenes mostradas son con fines ilustrativos.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud de la mesa: 76 «(193 cm).
- Ancho de mesa: 20 «(51 cm).
- Gama de la altura de la mesa: 27 «a 44» (68.6-111.8 cm).
- Capacidad del peso del paciente: 1.000 lbs (454 kg) - orientación normal. 500 lbs (227 kg) - inclinación lateral y orientación inversa.
- Características de control de mano
- Botón de orientación normal/inversa.
- Volver al botón de nivel.

FLEXIBILIDAD

El diseño del pedestal en forma de T y la orientación inversa brindan un acceso óptimo al paciente por parte de todo el equipo quirúrgico, independientemente del procedimiento

ESPECIFICACIONES

Mesa Quirúrgica Steris Amsco 3085 SP
La mesa quirúrgica Steris Amsco 3085 SP con tecnología agnóstico de sistemas de integración permite una comunicación sin fisuras entre prácticamente cualquier equipo del proveedor.

Funciones de conversión automáticas para la posición inversa del paciente, independientemente de la ubicación del reposacabeza significa que los comandos se interpretan automáticamente de acuerdo con la orientación seleccionada.

La hidráulica Bieri proporciona una articulación de la mesa ultra-precisa para especialidades como la Urología y la neurología. El movimiento de la mesa es liso y exacto a través de la gama completa de posiciones. Con la adición de la extensión ortopédica, la mesa quirúrgica de Amsco 3085 SP tira de la tracción y proporciona la flexibilidad de colocación para los procedimientos ortopédicos de la cadera y de la extremidad más baja.

El diseño de pedestal en forma de T y la orientación inversa proporcionan un acceso óptimo al paciente por todo el equipo quirúrgico, independientemente del procedimiento.